

PLAY

눈으로 OOOO 하기!!

Play with eyeCan!

Using as a mouse #1

NAVER **boom** 요즘 제일 뜨는 게 뭐야?

로그인 | 네이버 | tip | 마이

분홍 분 베스트 유머 연예 동영상 이미지 놀이터 붐그림판 **생활의 게임**

오늘의 놀이 | The 브레인 | 판타스틱 어른백서 | 임마가 간다

숨은그림찾기
다른그림찾기
스도쿠
미로찾기
선고놀이

마일머일 다른그림찾기

2011-07

07월 22일 다른그림찾기

PLAY TIME 00:00 CATCH 0/0


2011년 7월 22일 다른그림찾기 총 1,900회 도전

00:31 VS 내기록이 없습니다

Using as a mouse #2



Using as a 0000 #1

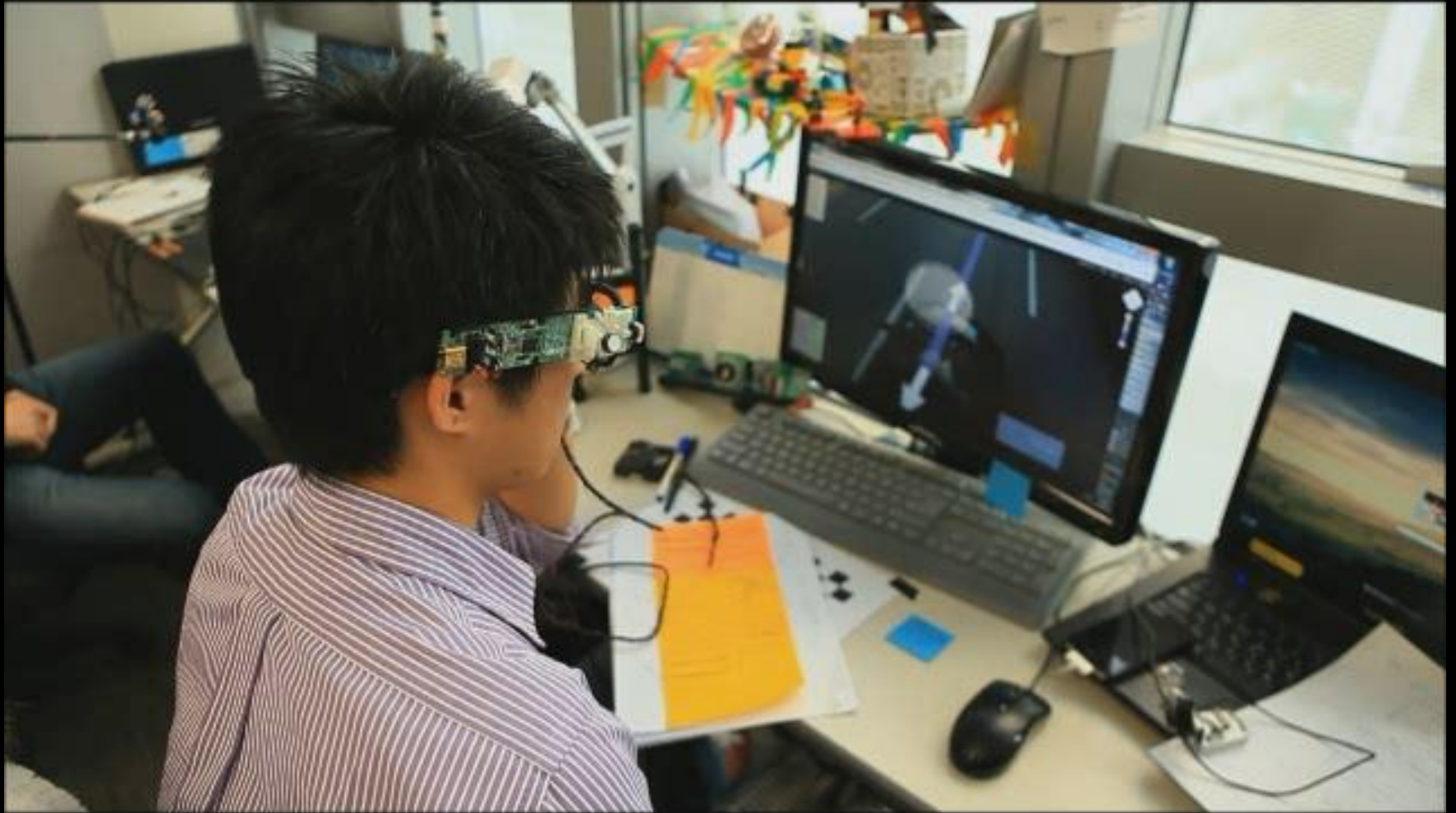

Using as a 0000 #2



예) 눈으로 가장 쉽게 만화를 보는 방법



예) 눈으로 가장 쉽게 만화를 보는 방법 <만드는 방법>

Eye Action

PC Action

Comics.xml

<action>

<move>on</move>

<click>click</click>

<short_click>down</short_click>

<long_click>o</long_click>

<click_margin_left>left</click_margin_left>

<click_margin_right>right</click_margin_right>

</action>

<config>

<marginHorizontal>0.2</marginHorizontal>

</config>

마우스 커서 움직임

클릭: 클릭

짧은 클릭: ↓ 버튼

긴 클릭: 'o' 버튼

좌측 가장자리 클릭: ← 버튼

우측 가장자리 클릭: → 버튼

가장자리 인식 범위를 스크린 크기의 20%로 설정

할당 값

설정 값 이름

구분


Eye Lid Action




Open




Close

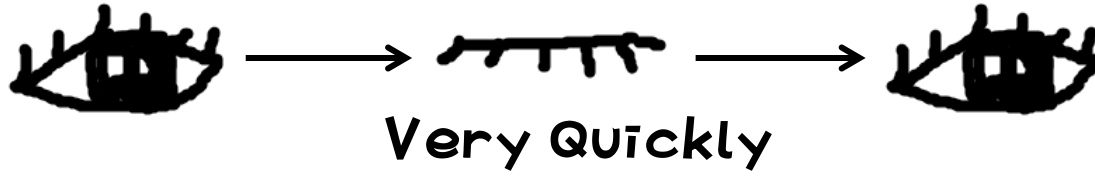


Blink

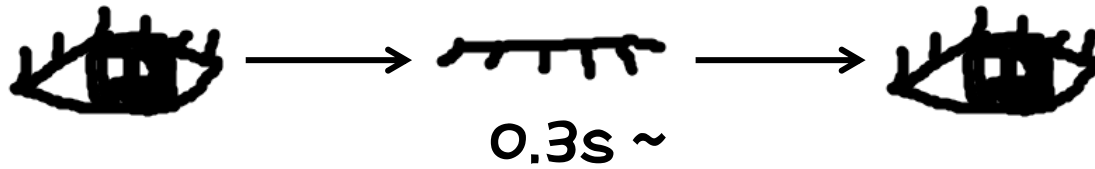

Short Click

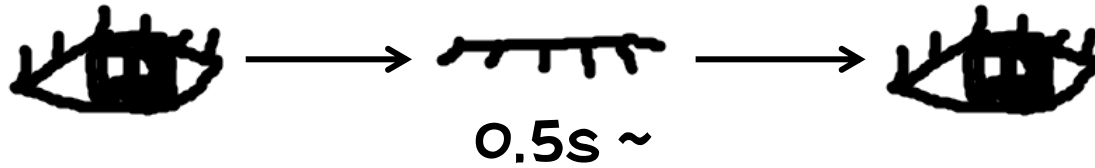

Click

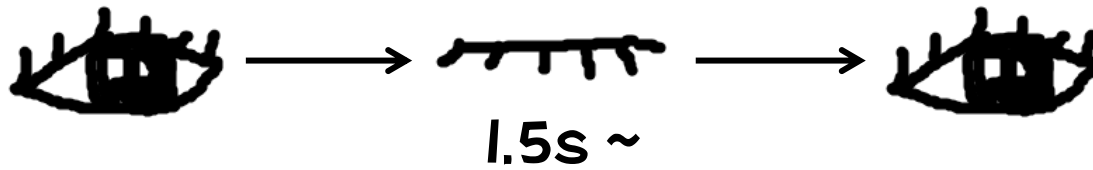



Long Click





Dwell


Eye Move Action

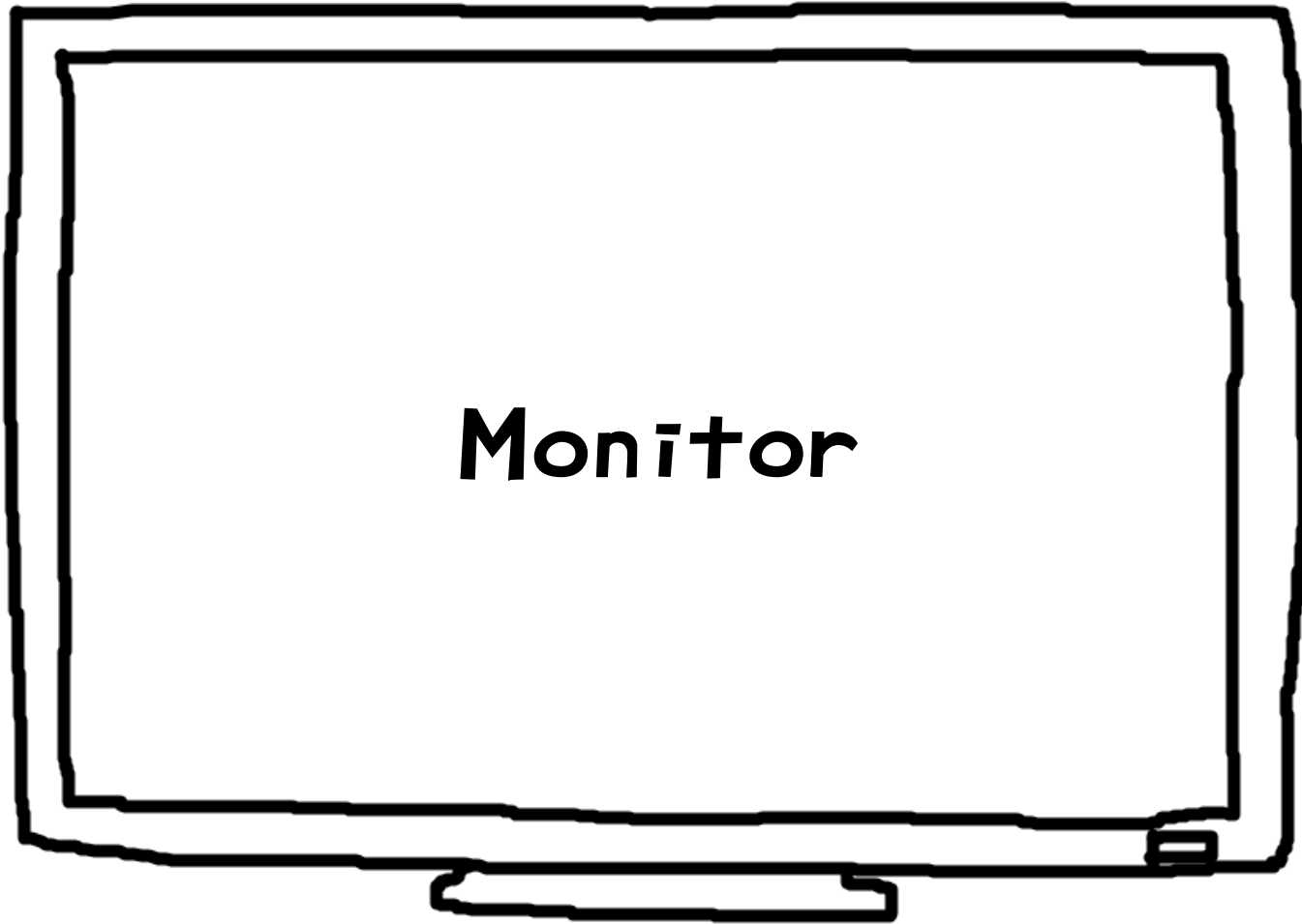

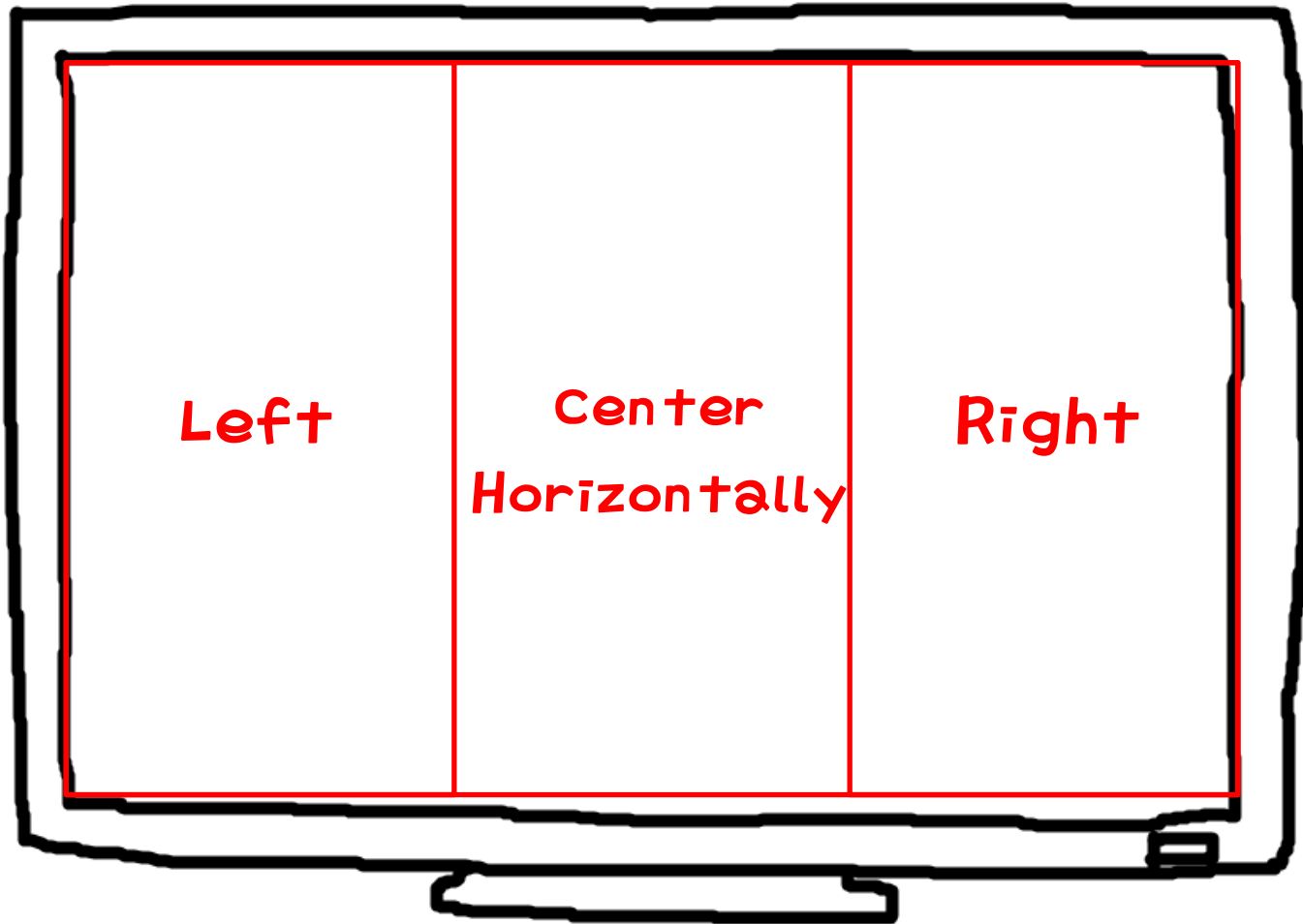

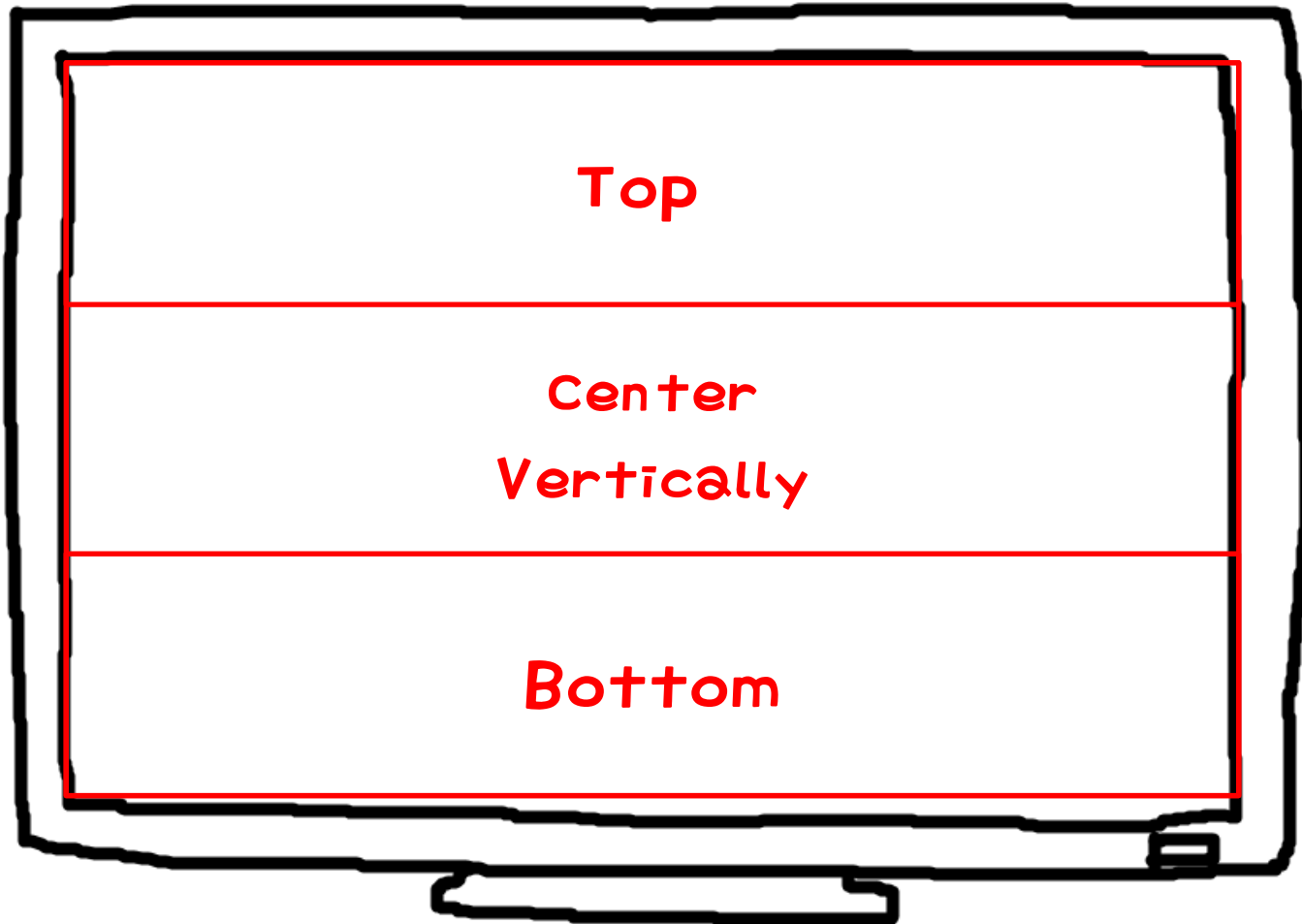

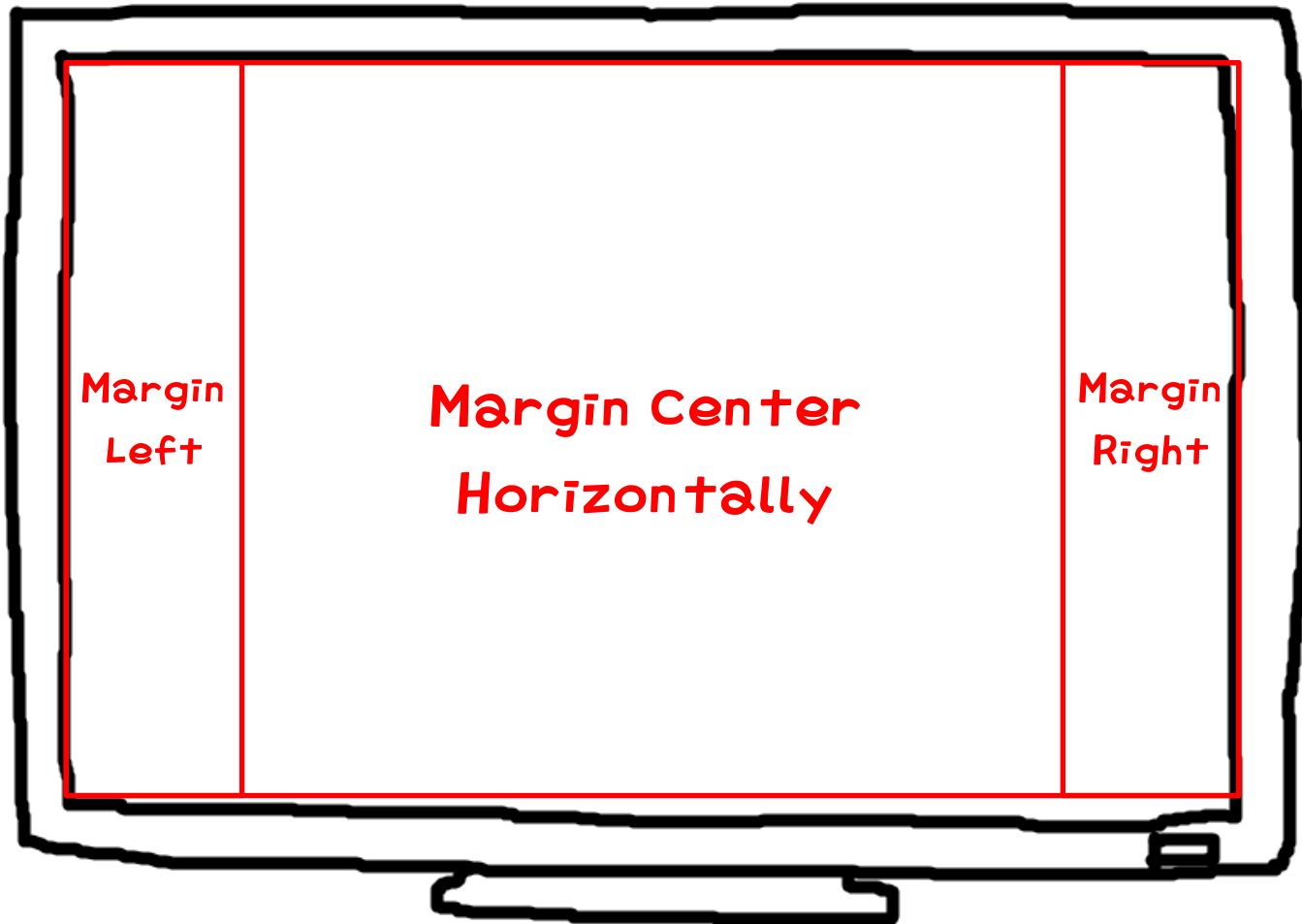

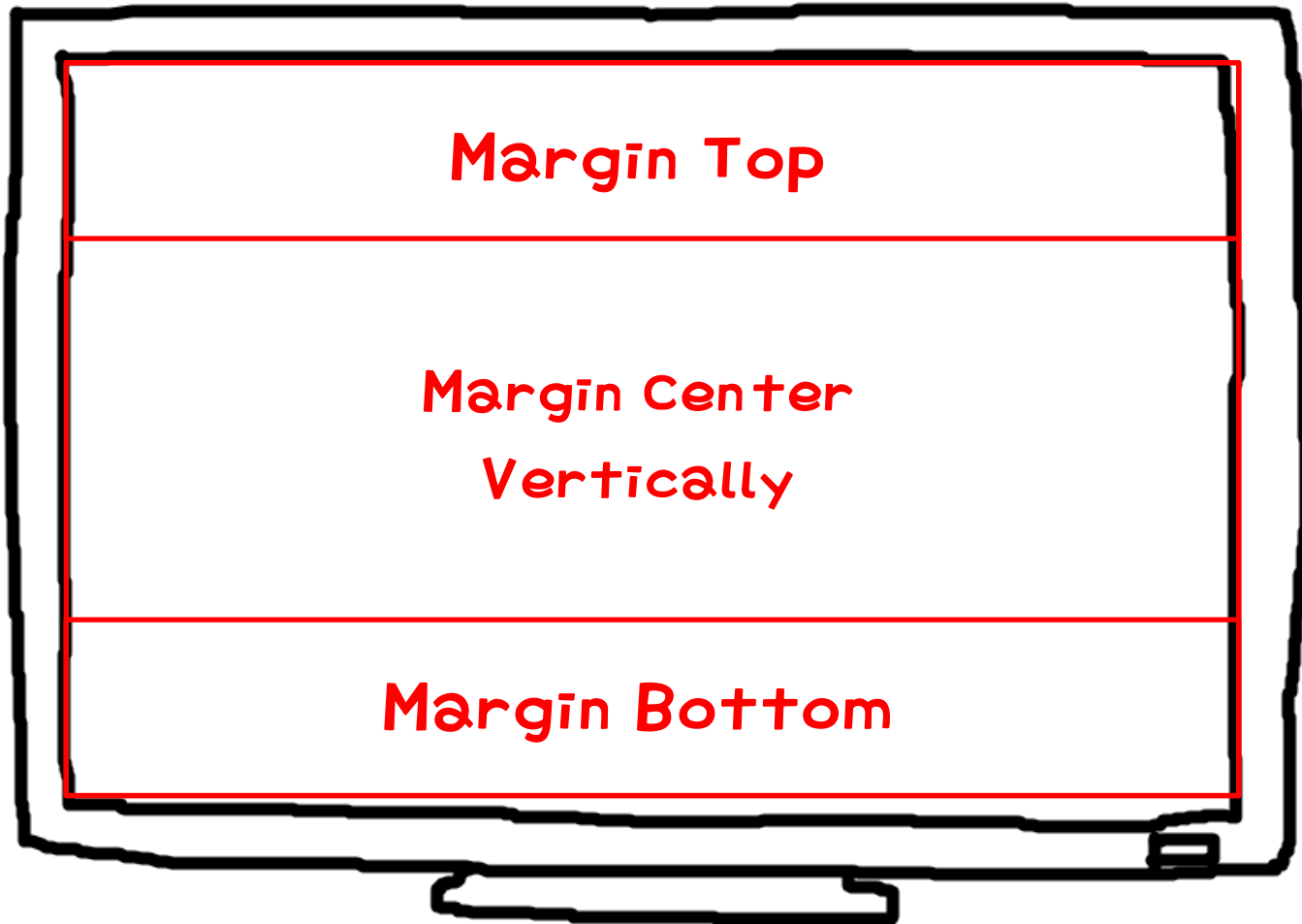

Out Top


Margin Center

Center

Out
Left

Out
Right

Out Bottom

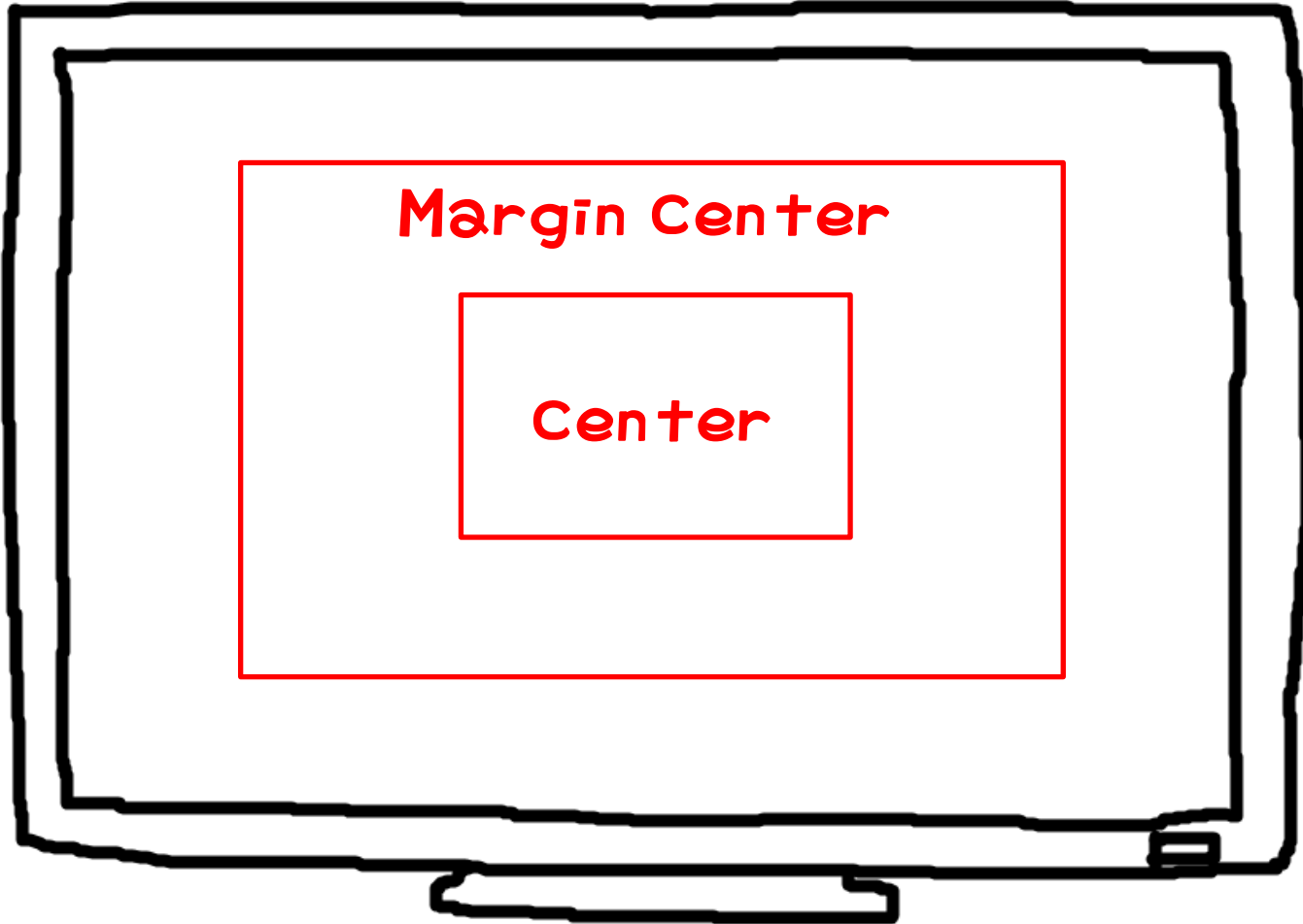

Eye Action =

Eye Lid Action + Eye Move Action

예) (화면 가운데를 보면서) + (눈을 빠르게 깜빡이기)

Eye Action List



기본 마우스 설정

mode : 기본 마우스 동작 설정 [click, 2click, Rclick, drag, scroll] (default: none)
move : 마우스 커서 이동 관련 설정 [on, fps, off] (default: off)
calibrate : 자동 위치 보정 기능 사용 여부 [on, off] (default: on)

눈 기본 동작 관련

open : 눈을 뜨고 있을 때
blink : 눈을 빠르게 깜빡일 때
short_click : 눈을 짧게 감았다가 뜰 때
click : 눈을 감았다가 뜰 때 (클릭)
long_click : 눈을 길게 감았다가 뜰 때
close : 눈을 감고 있을 때
dwell : 한 곳을 오래 보고 있을 때

눈 동작 - 화면 밖

- 화면 밖을 볼 때

out_left
out_right
out_top
out_bottom

- 화면 밖을 클릭할 때

click_out_left
click_out_right
click_out_top
click_out_bottom

눈 동작 - 화면 (1/3 기준)

- 화면을 바라볼 때

left
right
top
bottom
center
center_horizontal (수평 방향)
center_vertical (수직 방향)

- 화면 상에서 클릭할 때

click_center
click_left
click_right
click_top
click_bottom

- 화면 상에서 깜빡일 때

blink_center
blink_left
blink_right
blink_top
blink_bottom

- 화면 상에서 눈을 감을 때

close_center
close_left
close_right
close_top
close_bottom

눈 동작 - 화면 가장자리

- 화면 가장자리를 볼 때

margin_left
margin_right
margin_top
margin_bottom
margin_center
margin_center_horizontal (수평 방향)
margin_center_vertical (수직 방향)

- 화면 가장자리를 클릭할 때

click_margin_center
click_margin_left
click_margin_right
click_margin_top
click_margin_bottom

- 화면 가장자리에서 깜빡일 때

blink_margin_center
blink_margin_left
blink_margin_right
blink_margin_top
blink_margin_bottom

- 화면 가장자리에서 눈을 감을 때

close_margin_center
close_margin_left
close_margin_right
close_margin_top
close_margin_bottom

PC Action List



마우스 동작

click : 왼쪽 버튼 클릭
right_click : 오른쪽 버튼 클릭

키보드 동작

a-z,0-9 : 해당 char
enter : Enter 키
space : Space 키
left : 왼쪽 화살표
right : 오른쪽 화살표
up : 위쪽 화살표
down : 아래쪽 화살표
pageup : Page Up 키
pagedown : Page Down 키
insert : Insert 키
delete : Delete 키
pause : Pause 키
scrolllock : Scroll Lock 키
backspace : Back Space 키
ctrl : 왼쪽 Ctrl 키
rightctrl : 오른쪽 Ctrl 키
alt : 왼쪽 alt 키
rightalt : 오른쪽 alt 키
tab : tab 키
capslock : Caps Lock 키
shift : 왼쪽 shift 키
rightshift : 오른쪽 shift 키
esc : esc 키
F1-F12 : Function 키

기타 동작

none : 빈 action
emergency : 비상 알림음 재생
play% : %는 숫자
(해당 숫자의 음원 play)

Config List



화면 관련

- 화면 상에서 가장 자리의 비율 (default: 0.2)

marginHorizontal : 수평 방향

marginVertical : 수직 방향

- Fps 모드에서 시점 전환이 되는 범위 (default: 0.25)

fpsMarginHorizontal : 수평 방향

fpsMarginVertical : 수직 방향

- Fps 모드에서 마우스 감도

fpsSensitivityX : 수평 방향

fpsSensitivityY : 수직 방향

- 음원 등록 하기 (0번부터 등록)

<tone%> 경로 </tone%>

예: <tone0>audio/alarm.wav</tone0>

Prefix

@ : 다음 같은 이벤트가 발생할 때까지 반복 동작

예)
 <click>@x</click> : 클릭 시 계속하여 x 키 입력

주의 사항)

일반적으로 동작을 해제할 수 있는 키 입력과 묶어서 정의해야 함
그렇지 않을 경우 키 입력을 멈출 수 없음

~ : 버튼 천천히 누르기

예)
 <click>~x</click> : 클릭 시 x 버튼을 누르고, 100ms 후 버튼 놓기

주의 사항)

100ms 딜레이 때문에 반복 입력이 들어갈 경우,
마우스 동작이 버벅일 수 있음.
반드시 단일 동작과 묶어서 사용할 필요 있음

Postfix

_ : 버튼/키 down 이벤트

예)
`<click>x_</click>` : 클릭 시 x 키 down 이벤트 발생

^ : 버튼/키 up 이벤트

예)
`<click>x^</click>` : 클릭 시 x 키 up 이벤트 발생

주의 사항)

일반적으로 up과 down 을 모두 포함 할 수 있도록 스크립트 작성 필요
~ prefix와 함께 사용할 수 없음

Link

, : 한 이벤트에서 동시에 입력

예)

`<click>a,b,c</click>` : 클릭 시 abc 키 입력 발생

주의 사항)

동시에 눌러 있는 상태를 만들기 위해서는 down/up을 구분해야 한다.
(a_,b_,c_,c^,b^,a^)

- : 같은 이벤트 다수 발생 시 순차적으로 입력

예)

`<click>a-b-c</click>` : 클릭 시마다 순차적으로 a, b, c 키 입력

주의 사항)

일반적으로 up과 down 을 모두 포함 할 수 있도록 스크립트 작성 필요
~ prefix와 함께 사용할 수 없음

How to use a script?

